


Cubo radiónico para Rife 2.π Contact



Holistic Dreams
Technologies

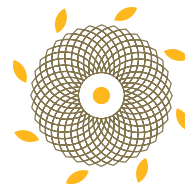


Dispositivo radiónico para tratamientos a distancia con la Rife 2.π Contact.

Dispositivo radiónico que complementa la Rife 2.π Contact. Para tratamientos a distancia. Se puede usar utilizando un testigo de la persona a tratar, como por ejemplo pelo dentro de un bote de vidrio. Se pueden usar todos los programas instalados en la Rife.


Funciona gracias a una placa de ondas escalares triangular especial para la Rife, una placa bañada en oro con la geometría sagrada Cubo Metatrón y otra con la geometría sagrada de la flor de la vida.

Se puede aplicar a distancia cualquier programa instalado en la Rife 2.π Contact. Insertamos la banana del cubo en la ranura hembra de color negro o roja de la Rife. Colocamos el testigo (preferiblemente pelo) en un bote de vidrio, dentro del cubo en el espacio indicado para ello y cerramos la tapa del cubo. **IMPORTANTE: retiramos la tapa del bote durante el uso en el cubo.**

Ponemos en marcha la rife con el programa adecuado y esperamos a que finalice. Se recomienda que, una vez finalizado el programa, se cierre el bote de vidrio con una tapa y se guarde el testigo dentro de papel de aluminio.

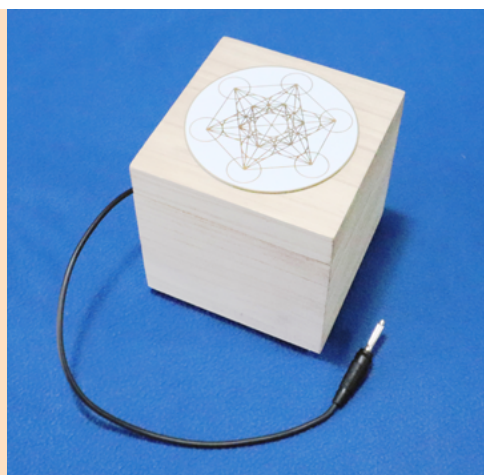

- 1º Colocar el testigo en la placa radiónica.
- 2º Cerrar la tapa del cubo.
- 3º enchufar la banana del cubo, en la ranura negra o roja
- 4º Poner el programa adecuado en la Rife.

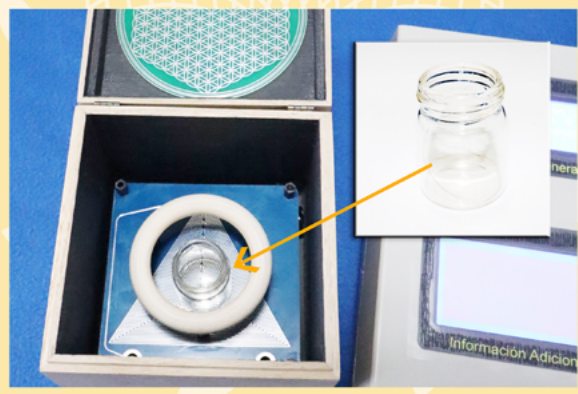

Se puede utilizar para:

- Tratamientos a distancia personas hospitalizadas.
- Tratamiento a distancia personas que no pueden usar presencialmente la Rife 2.π Contact.
- Tratamientos para niños.
- Tratamientos de mascotas. Una vez conozcamos la dolencia o patología afín o equivalente ya que virus y bacterias pueden ser diferentes en animales y humanos.

Obviamente es más efectivo usar la Rife 2.π Contact presencialmente con las 4 pinzas pero en ocasiones esto no es posible como por ejemplo personas hospitalizadas.

Si se quiere hacer un tratamiento a distancia efectivo se debe de hacer con asiduidad para notar su efecto.

Se pueden usar dos cubos por Rife 2.π Contact por sesión, siendo eso sí, el mismo tratamiento para los dos.

Tamaño: 12 cm x 12 cm x 12 cm



Holistic Dreams
Technologies

Fabricantes de dispositivos:

- Radiónicos
- Campo Magnético pulsado
- Electroterapia sistema Rife

Asesoramiento en geopatías
www.holisticdreams.es



www.holisticdreams.es

info.holistic.dreams@gmail.com / info@holisticdreams.es